

CONTEXTE & OBJECTIFS

Constat d'un **nombre important de rupture du système d'emballage** du matériel opératoire stérile dans les établissements sous-traités (E1, E2) impactant leurs activités
But: ↓ **taux d'emballages perforés et identification des axes d'amélioration** au sein de chaque établissement.

METHODE

Réalisation d'**audits croisés** entre l'établissement sous-traitant (E0) et les établissements sous traités (E1, E2)
Phase 1: Suivi des plateaux perforés (2 semaines) à l'aide d'une fiche de suivi:

- État du conditionnement
- Nombre et noms des plateaux perforés
- Cause supposée

STERILISATION E0 DECHARGEMENT AUTOCLAVE	<input type="checkbox"/> Tous les conditionnements sont conformes <input type="checkbox"/> Conditionnements perforés/déchirés Nombre de plateaux non conformes : Intitulé (s) : VISA :
STERILISATION E0 MISE EN ARMOIRE	<input type="checkbox"/> Tous les conditionnements sont conformes <input type="checkbox"/> Conditionnements perforés/déchirés Nombre de plateaux non conformes : Intitulé (s) : VISA :
STERILISATION E1 RECEPTION ARMOIRE	<input type="checkbox"/> Tous les conditionnements sont conformes <input type="checkbox"/> Conditionnements perforés/déchirés Nombre de plateaux non conformes : Intitulé (s) : VISA :
BLOC E1 RECEPTION ARMOIRE	<input type="checkbox"/> Tous les conditionnements sont conformes <input type="checkbox"/> Conditionnements perforés/déchirés Nombre de plateaux non conformes : Intitulé (s) : VISA :
MOTIF SUSPECTE DE LA PERFORATION :	<input type="checkbox"/> Objets mal positionnés à l'intérieur de l'emballage <input type="checkbox"/> Superposition <input type="checkbox"/> Frottement <input type="checkbox"/> Autres :

Phase 2: Analyse visuelle des emballages perforés → **détermination des causes de perforations** non identifiées


Phase 3: Observation des conditions de manipulation, transport et stockage des plateaux opératoire par un binôme de pharmaciens inter-établissements

RESULTATS


Indicateurs	E1	E2
Taux de perforations sur 2023 (%)	0,6	3
Taux de perforations sur la période auditée (%)	0,27	2,15
Nombre d'emballages perforés sur la periode auditée	3	23
dont plateaux de bloc (%)	100	94
Nombre de plateaux opératoires traités sur la periode auditée	1129	1071

Spécialité la plus impactée: **chirurgie orthopédique (E1: 33%; E2: 60%)**

Pourcentage de perforation en fonction de l'étape de détection

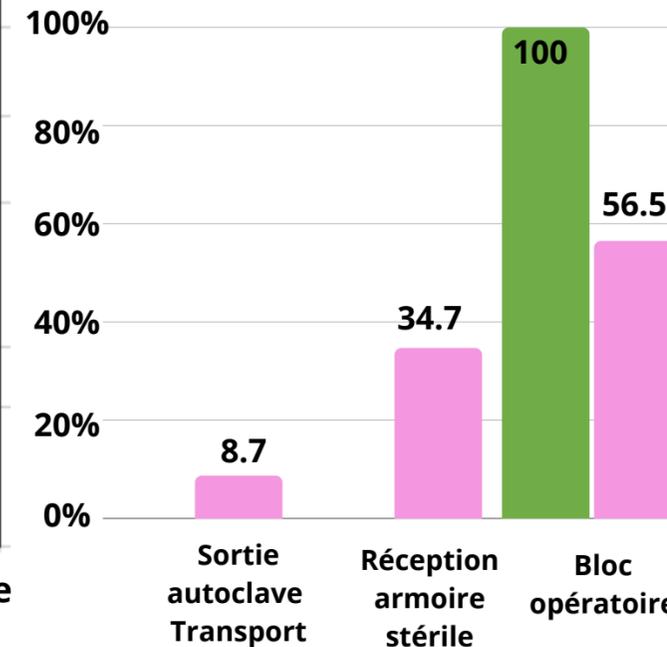


Nombre de plateaux perforés en fonction de la cause de perforation

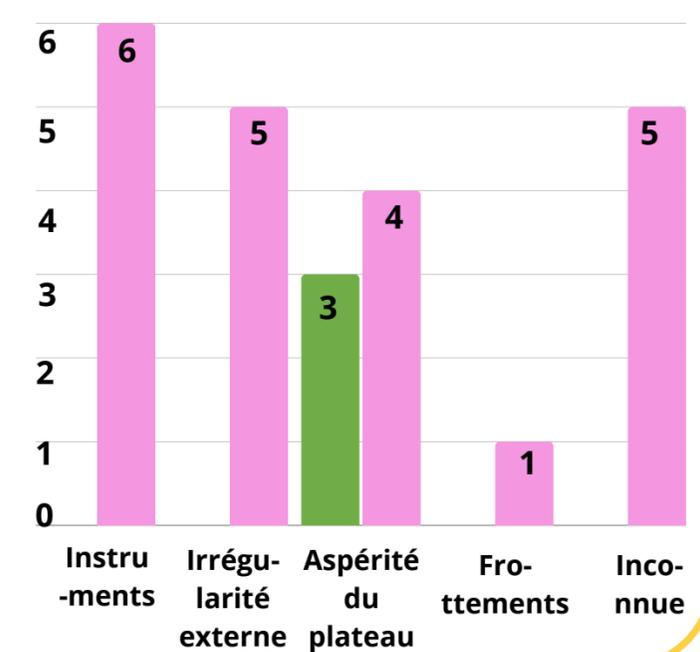

DISCUSSION ET CONCLUSION

CAUSE MULTIFACTORIELLE

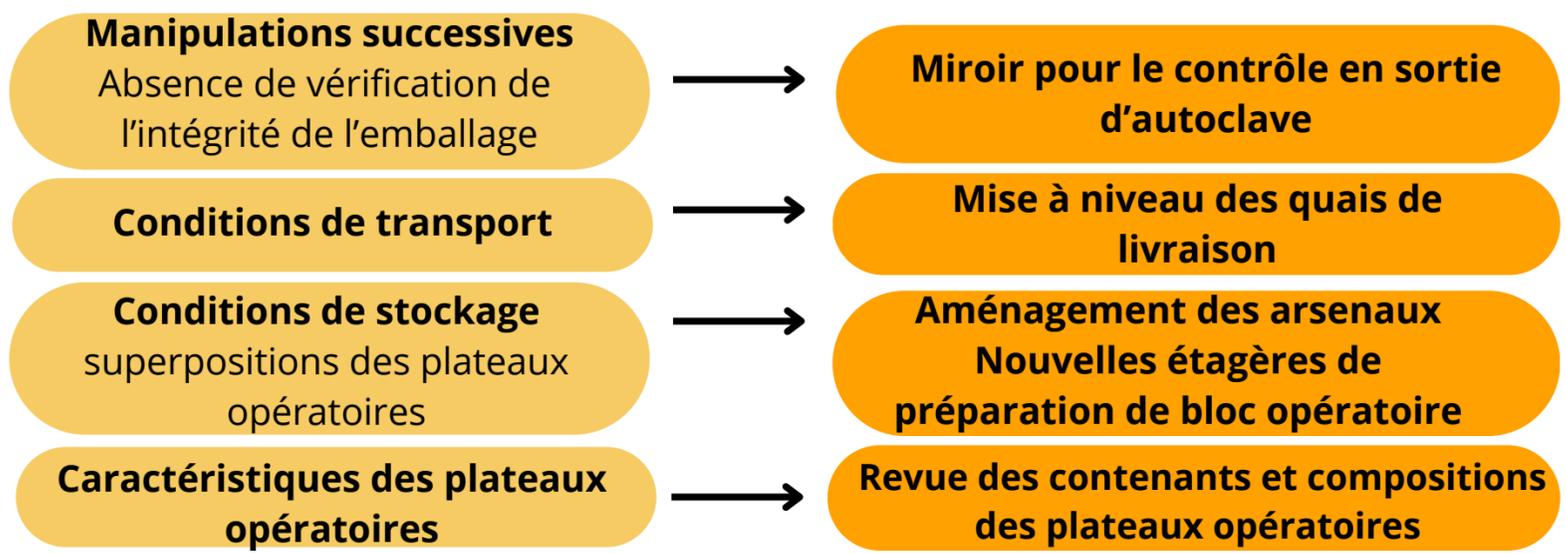

Une sensibilisation des équipes ainsi que des améliorations techniques ont été nécessaires afin de limiter le taux d'emballages perforés. Une comparaison du taux de perforation après mise en place des mesures correctives va être réalisée afin d'évaluer l'impact des actions effectuées.